



ESPECIALISTAS EN ANESTESIA Y CUIDADOS RESPIRATORIOS



Shenzhen HugeMed Medical Technical Development Co.,Ltd

Add: 8F,Block A, Tempus Building, 1st Qingshuihe Road, Luohu District

Shenzhen City, Guangdong, China

Tel: +86-755-8226 7835

Fax: +86-755-2227 5833

Email: info@hugemed.net

Website: www.hugemed.net




HugeMed VLRM/VLDM

Cuando el tiempo es crítico, convierta su dispositivo en el HugeMed VLRM/VLDM.

Ideal para entornos exigentes de quirófano, urgencias y UCI, el VLRM/VLDM proporciona una visión siempre clara de la vía aérea y una mayor maniobrabilidad que permite intubaciones rápidas. El sistema VLRM/VLDM le permite elegir entre 8 ramas reutilizables y 5 ramas desechables para cubrir una amplia gama de pacientes, desde bebés hasta obesos mórbidos.

Añada la grabación en tiempo real y un tutorial a bordo, y verá por qué el HugeMed VLRM/VLDM es el elegido para la videolaringoscopia avanzada.

VLRM

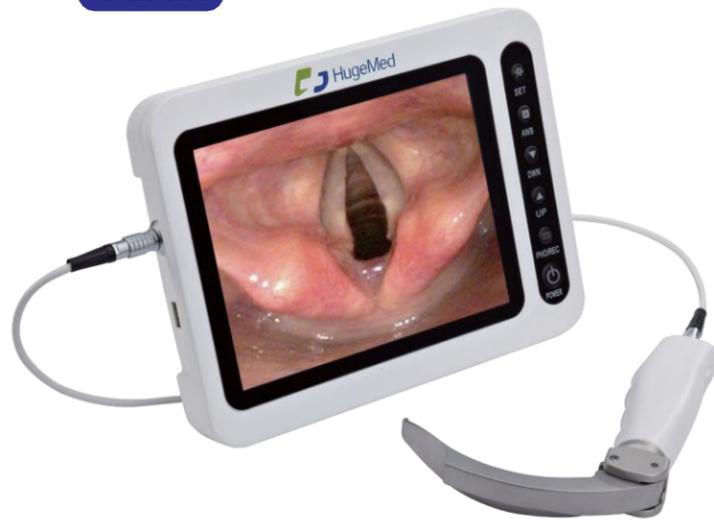


Ramas Reusables

VLM = VISTAS AVANZADAS DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS

- Monitor digital en color con calidad LCD.
- Videolaringoscopio reutilizable con cámara de resolución digital.
- Innovador dimensionamiento de la hoja, angulación y posicionamiento de la cámara.
- Función antiniebla, calentamiento rápido para resistir el enturbiamiento de la lente y las secreciones.

VLDM

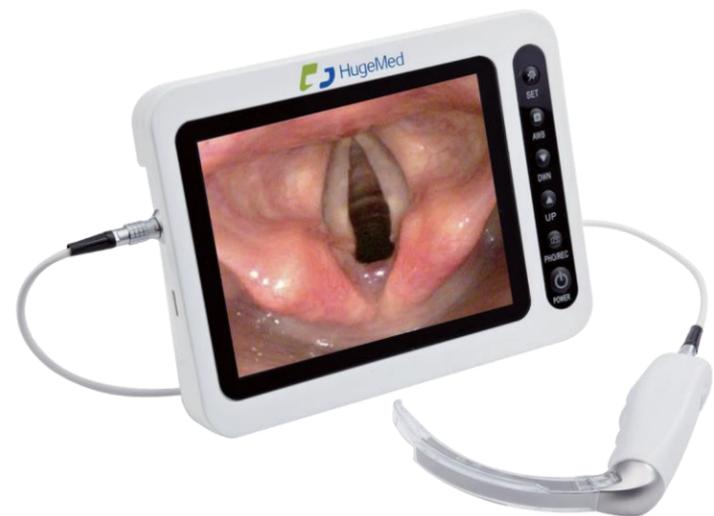

Ramas Desechables

VLM = FUNCIONES AVANZADAS PARA EL USUARIO

- La grabación integrada en tiempo real ayuda a confirmar la colocación del tubo y facilita la enseñanza.
- Diseño ergonómico y construcción robusta para múltiples aplicaciones clínicas.
- Ramas reutilizables en 8 tamaños: MILLER 00, 0, 1, MAC 1,2,3,4,5.
- También disponible en 5 tamaños de un solo uso.

Videolaringoscopia Avanzada:

Grabación en tiempo real. Claridad de pantalla LCD.



Aplicaciones

- Intubaciones de primer uso, en sustitución de la laringoscopia directa.
- Vistas orofaríngeas normales o restringidas.
- Vistas laríngeas de Cormack-Lehane grados I-IV.
- Vías respiratorias en traumatismos: excelente para tratar la sangre y las secreciones en las vías respiratorias.
- Intercambio de tubos guiado por vídeo en la UCI.

Especificaciones

Type	VLRM	VLDM
Pantalla	Monitor LCD de 8 pulgadas con pantalla HD	
Resolución	1024*768RGB	
Salida audiovisual de datos	Si	
Resolución de la cámara	2 Megapíxeles	
Ángulo de visión	66°	
Iluminación	≥800LUX	
Autonomía de batería	> 2 hours	
Capacidad de la batería	3200mAh	
Tensión	3.7V	
Tipo de rama	Ramas Reusables	Ramas Desechables
Material de la rama	SUS316L	PC
Función de disparo y grabación	Si	
Antiniebla	Antiniebla cuando está encendida	
Tamaño de las ramas	Miller 00/0/1; Mac 1/2/3/4/5	Mac 1/2/3/4/5
Puertos HDMI & USB	Incluidos	
Conector para pantalla y mango	Incluidos	
Soporte (con bandeja)	Incluidos	
Accesorios	Adaptador, Cable de alimentación, Línea de conexión de datos	
Desinfección de las ramas	Consulte instrucciones del laringoscopio reutilizable	Consulte instrucciones del laringoscopio desechable